WEGO威高

- 个性化设计
- 安 全 可 靠
- NMPA认证



显微操作管

Micromanipulation tubes

至 臻 品 质　　威 高 智 造


注册证号：鲁械注准20212180652

显微操作管

剥卵针/操作针 Denuding/Handling Pipette

- 用于去除卵母细胞外的卵丘颗粒细胞或用于胚胎转移
- 由外径1.5mm的硼硅酸盐玻璃机械拉制而成
- 配套符合人体工程学设计的轻便型手柄使用




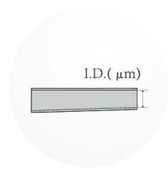




固定针 Holding Pipette

- 用于固定卵母细胞或胚胎
- 标准接触面和吸力，保持卵母细胞的稳定

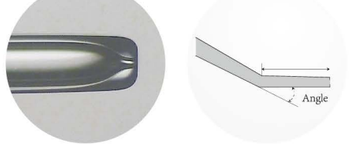

显微注射针 ICSI Pipette

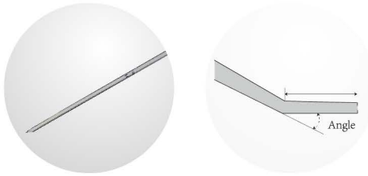

- 易于吸取精子将其注入卵母细胞
- 标准锥形更容易控制过程
- 针尖的锐度可轻松穿透透明带和卵膜，减少对卵母细胞的不良影响

卵子激活液 （实验室科研用）

使用说明：

1. 取0.5ml卵子激活液加入中央皿中，用培养油覆盖，37°C（不需要通二氧化碳）温育至少2小时。
2. ICSI后，将卵子放入上述液体中培养15分钟。
3. 培养后，至少清洗卵子6次，然后再培养16-18小时后，进行卵子受精情况评估。



包装规格：1ml/瓶

山东威高瑞生医疗器械有限公司

地址：山东省威海火炬高技术产业开发区威高路1号
咨询电话：400-646-6666　　邮编：264210
电话：0631-5715912　　网址：www.wegoruisheng.com
传真：0631-5716403　　邮箱：rsxshscb@weigaogroup.com